

en

[REF] TR301

DESCRIPTION OF DEVICE & CONTENTS

Trinity Adhesive Remover

Sting free medical adhesive remover spray (50ml).

INTENDED USE

Removal of adhesives, dressings and appliances from skin.

INSTRUCTION FOR USE

1. Spray around the edge of the adhesive and wait a few seconds.
2. Gently peel adhesive away from the skin using additional spray to ease removal if necessary.

INFORMATION

Dries in a few seconds.
Sprays at any angle.

CAUTION

- Avoid direct use on wound beds.
- If in doubt, patch test a small area prior to use.
- Should skin irritation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.
- Avoid inhalation.
- For external use only.

WARNINGS

Use only as directed. Pressurised container: may burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C. Keep out of reach of children.

EXTREMELY FLAMMABLE

SERIOUS INCIDENT REPORTING

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

SAFE DISPOSAL INSTRUCTIONS

Dispose of product according to national or local laws.

de

[REF] TR301

ARTIKELBESCHREIBUNG UND INHALT

Trinity Adhesive Remover

Reizfreies Spray zum Entfernen von medizinischen Klebstoffen von Stomaversorgungen oder Wundverbänden (50 ml).

VERWENDUNGSZWECK

Leichteres Entfernen der Klebereiste von Verbänden oder anderen Haftmaterialien auf gesunder Haut.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Das Spray um die zu lösende Versorgung aufsprühen und einige Sekunden warten.
2. Versorgung vorsichtig von der Haut abziehen, evtl. Vorgang wiederholen.

PRODUKTINFORMATION

Trocknet in wenigen Sekunden, daher keine Beeinträchtigung der Haftkraft der neuen Versorgung.
Lässt sich aus jedem Winkel aufsprühen.

VORSICHT

- Direkte Anwendung auf Wunden vermeiden.
- Im Zweifelsfall vor dem Verwenden an einem kleinen Bereich der Haut testen.
- Bei Auftreten von Hautirritationen Anwendung abbrechen und medizinisches Fachpersonal aufsuchen.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.

ACHTUNG

Nur nach Vorschrift verwenden. Hochentzündlich. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50° Grad schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

HOCHENTZÜNDLICH

MELDUNG SCHWERER STÖRUNGEN

Im Falle einer schweren Störung, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, sollte diese dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Nutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN ENTSORGUNG

Entsorgung des Produktes gemäß nationalen oder lokalen Gesetzen.

fr

[REF] TR301

DESCRIPTION ET CONTENU DU PRODUIT

Trinity Adhesive Remover

Spray non irritant pour le retrait d'adhésifs médicaux (50 ml).

USAGE PRÉVU

Retrait des adhésifs, pansements et appareillages de la peau.

MODE D'EMPLOI

1. Vaporiser la solution autour du bord de l'adhésif et patienter quelques secondes.
2. Retirer doucement l'adhésif de la peau. Pour faciliter le retrait, effectuer de nouvelles vaporisations si nécessaire.

INFORMATIONS

Sèche en quelques secondes.
Vaporise sous n'importe quel angle.

ATTENTION

- Ne pas appliquer directement sur le lit de la plaie.
- En cas de doute, effectuer un test cutané sur une petite surface de la peau avant utilisation.
- En cas d'irritation cutanée, cesser toute utilisation et consulter un professionnel de santé.
- Ne pas inhaler.
- Pour usage externe uniquement.

AVERTISSEMENTS

Utiliser uniquement conformément au mode d'emploi. Récipient sous pression : peut exploser en cas d'exposition à la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Nes pas fumer. Ne pas percer ou brûler même après utilisation. Tenir à l'abri de la lumière du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Tenir hors de la portée des enfants.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE

SIGNALEMENT D'INCIDENT GRAVE

La survenance de tout incident grave lié à l'appareil doit être signalée au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

INSTRUCTIONS POUR ELIMINER LE PRODUIT EN TOUTE SECURITE

Éliminez-le selon les règles nationales ou locales.

it

[REF] TR301

DESCRIZIONE DISPOSITIVO E CONTENUTI

Trinity Adhesive Remover

Spray per la rimozione indolore di adesivi ad uso medico (50ml).

DESTINAZIONE D'USO

Rimozione di adesivi, medicazioni e apparecchiature dalla cute.

ISTRUZIONI D'USO

1. Spruzzare lungo il bordo del cerotto e attendere alcuni secondi.
2. Rimuovere delicatamente il cerotto dalla cute e, se necessario, spruzzare nuovamente del prodotto per semplificare l'operazione.

INFORMAZIONI

Asciuga in pochi secondi.
Getto omnidirezionale.

ATTENZIONE

- Evitare l'uso diretto sul sito della ferita.
- In caso di dubbi, effettuare un test su un'area tissutale ristretta prima dell'uso.
- In caso di irritazione cutanea, sospendere l'uso e consultare un medico.
- Evitare l'inalazione del prodotto.
- Solo per uso esterno.

AVVERTENZE

Utilizzare soltanto secondo le istruzioni fornite. Recipiente sotto pressione: rischio di esplosione se surriscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di ignizione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori ai 50°C. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

SIGNALAZIONE DI EVENTI AVVERSI SERI
Qualsiasi evento serio che si sia verificato in relazione al dispositivo dovrebbe essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO SICURO

Smaltire il prodotto conformemente alle norme nazionali e locali.

es

[REF] TR301

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO Y CONTENIDOS

Trinity Adhesive Remover

Spray para eliminar el adhesivo de uso médico sin escozor (50 ml).

USO PREVISTO

Retirada de restos de adhesivos, vendajes y aparatos de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Pulverice alrededor de los bordes del adhesivo y espere unos segundos.
2. Despegue suavemente el adhesivo de la piel y pulverice más producto si fuera necesario para facilitar la eliminación.

INFORMACIÓN

Se seca en pocos segundos.
Pulveriza en cualquier ángulo.

ATENCIÓN

- Evite el uso directo en el lecho de la herida.
- En caso de duda, realice una prueba de contacto en un área pequeña antes de usar.
- Si se produce irritación en la piel, interrumpa su uso y consulte a un profesional sanitario.
- Evite la inhalación.
- Indicado solo para uso externo.

ADVERTENCIAS

Utilizar solamente según lo indicado. Envase presurizado: pueden explotar si se calienta. Mantener el envase lejos del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. No perforar ni quemar incluso después de su uso. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50°C. Mantener fuera del alcance de los niños.

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES GRAVES

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo deberá notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA

Elimine el producto de acuerdo con las leyes nacionales o locales.

nl

[REF] TR301

PRODUCTBECHRIJVING & INHOUD

Trinity Adhesive Remover

Niet prikkende spray voor het verwijderen van medische kleefmiddelen (50ml).

BEOOGD GEBRUIK

Kleefmiddelen, stoma-opvangmaterialen en klevende wondverbanden van de huid verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Spuit op de rand van het stoma-opvangmateriaal of wondverband en wacht een aantal seconden tot de rand loslaat.
2. Spuit normaal tussen de huid en het stoma-opvangmateriaal of wondverband en haal het materiaal eenvoudig los van de huid.

INFORMATIE

Droogt in een aantal seconden.
Spuit vanuit elke hoek, ook ondersteboven.

LET OP

- Gebruik niet rechtstreeks op het wondbed.
- Test eerst een klein gebied in geval van twijfel.
- Als huidirritatie optreedt, stop het gebruik en raadpleeg een medische professional.
- Niet inademen.
- Alleen geschikt voor uitwendig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Spuitbus onder druk: kan barsten bij verhitting. Bewaar uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Bescherm tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Bewaar buiten het bereik van kinderen.

EXTREME ONTVLAMBAAAR

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIGE VERWILDERING

Verwijder het product volgens de nationale of plaatselijke wetgeving.



sv

[REF] TR301

BESKRIVNING AV PRODUKT OCH INNEHÅLL

Trinity Adhesive Remove

Spray 50 ml - smärtfri hållbarhetstaggning, silikon (siloxane)

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Avlägsnande av bandage, förband och häftämnen från hud.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

1. Spraya mellan hud och bandage/förband och vänta några sekunder.
2. Ta försiktigt bort bandaget/förbandet från huden, applicera mer spray om nödvändigt.

INFORMATION

Torkar på några sekunder.
Sprayar från vilken vinkel som helst.

OBSERVERA

- Undvik direktanvändning på sårtyr.
- Om du är osäker, testa på ett litet område före användning.
- Om hudirritation uppkommer, sluta använda och konsultera sjukvårdspersonal.
- Undvik inandning.
- Endast för utvärtes bruk.

WARNING

Använd bara enligt anvisningar. Behållare under tryck: kan explodera vid upphettning. Förvara skyddad från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning i närheten av behållaren förbjuden. Gör inte hål i behållaren och elda inte upp den - inte ens tom efter användning. Skydda mot solljus. Utsätt inte för temperaturer som överstiger 50°C. Förvara oåtkomlig för barn.


EXTREMT BRANDFÄRLIG

RAPPORTERING AV ALLVARIGA TILLBUD

Alla allvariga tillbud som inträffar i samband med användning av enheten ska rapporteras till tillverkaren och behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

ANVISNINGAR FÖR SÄKER KASSERING

Kassera produkten i enlighet med nationella eller lokala lagar.

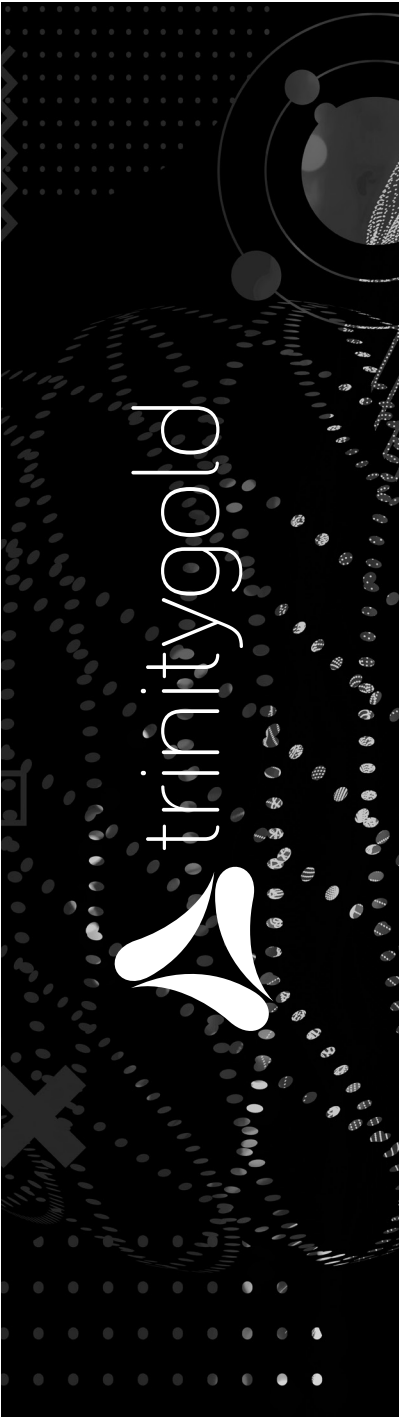

no

[REF] TR301

BESKRIVELSE AV ENHET OG INNHOUD

Trinity Adhesive Remover

Smertefri spray for fjerning av medisinsk lim (50ml).

BRUKSOMRÅDE

Til fjerning av klebemiddel, stomipose, og bandasjer fra huden.

BRUKSANVISNING

1. Spray rundt kanten av Bandasje/plate og vent noen sekunder.
2. Trekk bandasjen/platten forsiktig av huden. Påfør mer spray hvis det er nødvendig for å gjøre det enklere å fjerne klebemiddelet.

INFORMASJON

Tarke på noen sekunder.

Kan sprayes i alle retninger.

⚠️ FORSIKTIG

- Unngå direkte bruk på sår.
- Er du i tvil, kan du teste på et lite område før bruk.
- Skulle hudirritasjon oppstå, slutt å bruke og ta kontakt med helsepersonell.
- Unngå inhalering.
- Kun til utvortes bruk.

⚠️ ADVARSEL

Skal kun brukes i henhold til anvisningene. Trykkbeholder: kan eksplodere ved oppheting.

Skal holdes unna varmekilder, varme overflater, gnister, ild og andre antenningskilder.

Ryking forbudt. Unngå å stikke hull på eller brenne boksen, selv etter bruk. Skal beskyttes mot sollys. Unngå å utsette

for temperaturer over 50°C. Oppbevares utlilgjengelig for barn.

⚠️ EKSTREMT BRANNFARLIG

RAPPORTERING AV ALVORLIG HENDELSE

Enhver alvorlig hendelse som har funnet sted i forbindelse med apparatet skal rapporteres til produsenten og kompetente myndigheter i medlemslandet hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

INSTRUKSJONER FOR SIKKER AVHENDING

Produktet skal avhendes i henhold til nasjonal eller lokal lovgivning.

sk

[REF] TR301

POPIS PŘÍPRAVKU A OBSAHU

Trinity Adhesive Remover

Nepálivý odstraňovač zdravotnických adheziv v spreji (50 ml).

ÚČEL POUŽITÍ

Odstáření náplasti, krytí a přílnavých zdravotnických pomůcek z pokožky.

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Postříkejte pokožku okolo okrajů adheziva a počkejte několik sekund.
2. Jemne odstraňte adhezivum z pokožky. Znova postříkejte pokud potřebujete ulehčit odstránění.

INFORMÁCIE

Zaschne počas niekoľkých sekúnd.

Sprej strieka v ktoromkoľvek uhle.

⚠️ VAROVANIE

- Vyhýnajte sa priamemu kontaktu prípravku so spodinou rany.
- Pokiaľ ste si nie istý reakciou, otestujte prípravok pred použitím na malom kúsku pokožky.
- Pri podráždení pokožky prerušte používanie prípravku a poraďte sa s lekárom.
- Nevdychujte.
- Iba na vonkajšie použitie.

⚠️ UPOZORNENIE

Používajte iba v súlade s návodom. Nádobka pod tlakom: pri zahnutí môže prísť k výbuchu.

Zabráňte kontaktu so žiarou, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a ďalšími zdrojmi vznietenia. Nefajčite. Prázdnu nádobku neprearážajte a nevhadzujte do ohňa.

Chráňte pred slnkom. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávajte mimo dosah detí.

⚠️ EXTRÉMNE HORLAVÉ

OZNAMOVANIE ZÁVAŽNÝCH INCIDENTOV

Každý závažný incident, ku ktorému došlo v súvislosti s týmto zariadením, je potrebné oznámiť výrobcovi a kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sa používateľ alebo pacient nachádza.

POKYNY PRE BEZPEČNÚ LIKVIDÁCIU

Výrobek zlikvidujte v súlade s národnými alebo miestnymi zákonmi.

da

[REF] TR301

BESKRIVELSE AF PRODUKT OG INDHOLD

Trinity Adhesive Remover

Medicinsk klæbefjerner spray (50 ml). (No sting).

TILSIGTET ANVENDELSE

Fjernelse af klæbende bandager og klæberester, forbindinger og stomiposer fra huden.

BRUGSANVISNING

1. Spray omkring kanten af bandagen, og vent nogle få sekunder.
2. Fjern forsigtigt bandagen fra huden. Brug om nødvendigt yderligere spray for at lette fjernelse.

INFORMATION

Tørre på få sekunder.

Kan sprayes fra alle vinkler.

⚠️ FORSIGTIG

- Undgå direkte brug på sår.
- Er der tvivl, om produktet tåles, kan man lave en prøve et andet sted på kroppen.
- Hvis hudirritation skulle opstå, skal du stoppe anvendelse og kontakte din læge.
- Undgå inhalere.
- Kun til udvortes brug.

⚠️ ADVARSEL

Brug kun som anvist. Trykbeholder: kan eksplodere ved opvarmning. Holdes væk fra høj varme, varme overflader, gnister, åben ild eller andre tændkilder. Rygning forbudt. Må ikke perforeres eller brændes efter brug. Skal beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Opbevares utilgængeligt for børn.

⚠️ YDERST BRANDFARLIG

RAPPORTERING AF ALVORLIGE HÆNDELSER

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

INSTRUKTIONER TIL SIKKER BORTSKAFFELSE

Bortskaf produktet i henhold til national eller lokal lovgivning.

pl

[REF] TR301

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO E CONTEÚDO

Trinity Adhesive Remover

Spray para remoção indolor de adesivos médicos (50 ml).

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Remoção de adesivos, pensos e dispositivos

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Pulverize em redor do rebordo do adesivo e aguarde alguns segundos.
2. Retire suavemente o adesivo da pele, utilizando mais spray para facilitar a remoção, se necessário.

INFORMAÇÕES

Seca em poucos segundos.

Pulveriza-se de qualquer ângulo.

⚠️ ATENÇÃO

- Evitar o uso direto sobre escaras.
- Em caso de dúvida, efetuar um teste cutâneo, numa área pequena, antes de utilizar
- Se ocorrer irritação da pele, interromper a utilização e consultar um profissional de saúde
- Evitar a inalação.
- Apenas para uso externo.

AVISOS

Usar apenas como indicado. Recipiente pressurizado: pode explodir se for aquecido.

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas descobertas e outras fontes de ignição. Não fumar. Não fumar nem queimar mesmo após a utilização.

Proteger da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C. Manter fora do alcance das crianças.

⚠️ EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL

COMUNICAÇÃO DE INCIDENTES GRAVES

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à entidade competente do Estado-Membro no qual o utilizador e/ou o doente se encontra estabelecido.

INSTRUÇÕES PARA UMA ELIMINAÇÃO SEGURA

Elimine o produto de acordo com as leis locais ou nacionais.

pl

[REF] TR301

OPIS PRODUKTU I ZAWARTOŚCI

Trinity Adhesive Remover

Niepodrażniający skóry preparat w sprayu do usuwania resztek przyklepa. (50ml).

PRZEZNACZENIE

Do usuwania ze skóry resztek kleju..

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Spryskać krawędzie przyklepa i odczekać kilka sekund.
2. Delikatnie odkleić od skóry, zwiększając w razie potrzeby ilość sprayu, aby ułatwić usuwanie.

INFORMACJA

Schnie w kilka sekund.

Spryskiwać pod dowolnym kątem.

⚠️ UWAGA

- Unikać stosowania bezpośrednio na ranę.
- W razie wątpliwości należy przed użyciem przetestować na niewielkiej powierzchni skóry.
- W przypadku podrażnienia skóry przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Hvis hudirritation skulle opstå, skal du stoppe anvendelse og kontakte din læge.
- Unikaj wdychania.
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

⚠️ OSTRZEŻENIE

Stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją. Pojemnik pod ciśnieniem: nagrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartych płomieni oraz innych źródeł zapłonu. Nie palić w otoczeniu produktu. Nie przekuwać ani nie spalać, nawet po użyciu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Nie wystawiać na temperatury powyżej 50°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

⚠️ PRODUKT SKRAJNIE ŁATWOPALNY

ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW

Každý poważný incident, ktorý vystąpił w związku z urządzeniem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, na którego terytorium użytkownik i/lub pacjent przebywa.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ UTYLIZACJI

Produkt należy utylizować zgodnie z krajowymi lub lokalnymi rozporządzeniami.

CS

[REF] TR301

POPIS PŘÍPRAVKU A OBSAHU

Trinity Adhesive Remover

Nepálivý odstraňovač zdravotnických adheziv ve spreji (50 ml).

ÚČEL POUŽITÍ

Odstáření náplasti, krytí a přílnavých zdravotních pomůcek z pokožky.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Postříkejte pokožku kolem okraje adheziva a vyčkejte několik vteřin.
2. Jemně sloupněte adhezivum z pokožky. Znova postříkejte, pokud je třeba usnadnit odstránění.

INFORMACE

Zaschne během několika vteřin.

Sprej stříká v jakémkoliv úhlu.

⚠️ VAROVÁNÍ

- Vyhýnajte sa priamému kontaktu prípravku se spodinou rány.
- Pokud si nejste jisti reakcí, otestujte přípravek před použitím na malém kousku pokožky.
- Při podráždění pokožky přerušete používání přípravku a poraďte se s lékařem.
- Nevdechujte.
- Pouze k vnějšímu použití.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze v souladu s návodem. Nádobka pod tlakem: při zahnutí může dojít k výbuchu. Zamezte kontaktu s žárem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a dalšími zdroji vznícení. Nekuřte. Prázdnu nádobku neproarážajte a nevhazujte do ohně. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Uchovávajte mimo dosah detí.

⚠️ EXTRÉMNE HORLAVÉ

OZNAMENÍ ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY

Jakákoli závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výroci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/ nebo pacient usazen

POKYNY PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI

Výrobek zlikvidujte v souladu s národními nebo místními zákony.

sl

[REF] TR301

OPIS MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA IN VSEBINE

Trinity Adhesive Remover

Nepekoli medicinski sprej za odstranjevanje lepil.

NAMEN UPORABE

Odstranjevanje lepil, medicinskih oblog in naprav s kože.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Poškropite okoli roba lepila in počakajte nekaj sekund.
2. Nežno odlepite prilepjeno stran od kože, pri tem uporabite dodaten sprej, če je potrebno.

INFORMACIJE

Posuši se v nekaj sekundah.

Skropi pod vsakim kotom.

⚠️ OPOZORILO

- Izogibajte se uporabi direktno na rani, oziroma postelji rane.
- Če ste v dvomu, testirajte na manjšem delu kože pred uporabo.
- V primeru draženja kože, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim osebjem.
- Izogibajte se vdihavanju spreja.
- Samo za zunanjo uporabo.

OPOZORILO

Uporabljajte samo kot je navedeno. Posoda je pod pritiskom: lahko eksplodira, če se segreje. Hranite stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.

Ne kadite. Ne prebadajte ali ne zažigajte po uporabi. Zaščitite pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C. Hranite izven dosega otrok.

⚠️ EKSTREMNO VNETLJIVO

POKOČANJE O RESNIH INCIDENTIH

Každokoli resen incident, ki se je zgodil v povezavi z uporabo te naprave je potrebno sporočiti proizvajalcu in pristojni inštituciji v državi članici, v kateri je uporabnik in / ali pacient nastanjen.

NAVODILA ZA VARNO ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Produkt zavrzite skladno z nacionalni ali lokalnimi predpisi.