

Rhodes
Health

StoCare®

REMOVE

Medical Adhesive Remover Spray



5 061093 340003

REMOVE XL

Medical Adhesive Remover Spray



5 061093 340072

Non sting formula, sprays in any position

Spray Détachant pour Adhésif Médical.

Formule non irritante, peut être vaporisée dans toutes les positions.

DIRECTIONS: Peel back the edge of the medical appliance. Spray on the revealed skin. Gently start to remove the appliance. Use additional spray if required. Allow to dry before applying the next appliance.

CAUTION: Use only as directed. Do not spray on broken skin or very sensitive areas. Do not spray near or into the eyes. Discontinue use if irritation occurs. Keep out of the sight and reach of children.

INGREDIENTS: Siloxanes.



DANGER: Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurised container. May burst if heated. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn even after use. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. NO SMOKING.



EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL

Please recycle when empty

www.stocare.co.uk

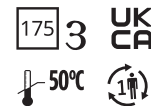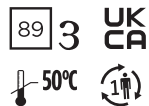

Order Code: EUSTC100
StoCare is a trademark of Rhodes Health Limited.

Order Code: EUSTC300
StoCare is a trademark of Rhodes Health Limited.

Rhodes Health Ltd. Newlands House, 60 Chain House Lane, Preston, Lancashire, PR4 4LG, United Kingdom

EU REP

EU Authorised Representative (EUAR): Apotech consulting France 6bis rue de Verdun 78110 LE VÉSINE

52304.D.PIL.V2
Last revised: 23/09/2025

FR: Spray Détachant pour Adhésif Médical.

Formule non irritante, peut être vaporisée dans toutes les positions.

INSTRUCTIONS: Soulevez le bord de l'appareil médical.

Vaporisez sur la peau exposée. Commencez à retirer l'appareil en douceur. Utilisez davantage de spray si nécessaire. Laissez sécher avant d'appliquer l'appareil suivant.

PRÉCAUTIONS: Utiliser uniquement selon les instructions. Ne pas vaporiser sur une peau abîmée ou des zones très sensibles. Ne pas vaporiser près des yeux ou à l'intérieur. Cessez l'utilisation en cas d'irritation. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

INGRÉDIENTS: Siloxanes

DANGER: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition. Récipient sous pression. Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Protéger du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. NE PAS FUMER.

AÉROSOL EXTREMEMENT INFLAMMABLE

Veuillez recycler lorsque le produit est vide. Code de commande : EUSTC100
StoCare est une marque déposée de Rhodes Health Limited.

CZ: Medical Adhesive Remover Spray
Nedráždivé složení, lze stříkat v jakékoliv poloze.

NÁVOD K POUŽITÍ: Odloupněte okraj pomůcky. Nastříkejte na odkrytou pokožku. Jemně začněte odstraňovat pomůcku. V případě potřeby aplikujte další dávku spreje. Nechte pokožku uschnout před aplikací další pomůcky.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze dle pokynů. Nestříkejte na poraněnou pokožku nebo velmi citlivé oblasti. Nestříkejte v blízkosti očí ani do očí. Pokud dojde k podráždění, přerušete používání. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

SLOŽENÍ: Siloxany

NEBEZPEČÍ: Nestříkejte na otevřený oheň ani na jiné zdroje zapálení.

Nádoba pod tlakem. Při zahřátí může prasknout.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Nepíchejte ani nespáľujte, ani po použití.

Držte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení.

ZÁKAZ KOUŘENÍ.

VYSOCE HOŘLAVÝ AEROSOL

Po vyprázdnění prosím recyklujte.

Kód produktu: EUSTC100

StoCare je ochranná známka společnosti Rhodes Health Limited.

DE: Medizinisches Klebstoffentferner spray
Nicht stechende Formel, sprüht in jeder Position

ANWENDUNG: Ziehen Sie den Rand des medizinischen Geräts ab. Auf die freigelegte Haut sprühen. Beginnen Sie vorsichtig mit dem Entfernen des Geräts. Bei Bedarf zusätzliches Spray verwenden. Lassen Sie es trocknen, bevor Sie das nächste Gerät auftragen.

VORSICHTSHINWEISE: Nur nach Anweisung verwenden Nicht auf verletzte Haut oder sehr empfindliche Haut sprühen.

Nicht in die Nähe oder in die Augen sprühen. Beenden Sie sofort die Anwendung, wenn Reizungen auftreten Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

INHALTSSTOFFE: Siloxane

GEFAHR: Nicht auf offene Flammen oder andere Zündquellen sprühen. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. NICHT RAUCHEN.

EXTREM ENTZÜNDBARES AEROSOL

Bitte nach dem Entleeren recyceln.

Bestellcode: EUSTC100

StoCare ist eine Marke der Rhodes Pharma Limited.

NL: Medische Lijmverwijderaarspray
Niet-prikkende formule, spuit in elke positie

INSTRUCTIES: Trek de rand van het medisch hulpmiddel los.

Spuut op de blootgelegde huid. Begin voorzichtig met het verwijderen van het hulpmiddel. Gebruik extra spray indien nodig. Laat drogen voordat u het volgende hulpmiddel aanbrengt.

LET OP: Alleen gebruiken zoals voorgeschreven. Niet spuiten op beschadigde huid of zeer gevoelige gebieden. Niet spuiten in de buurt van of in de ogen. Stop met gebruik als irritatie optreedt. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

INGREDIËNTEN: Siloxanen

EUS: Niet spuiten op een open vuur of een andere ontstekingsbron.

Houder onder druk. Kan barsten bij verhitting.

Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. NIET ROKEN.

ZEER LICHT ONTVLAMBAAR AEROSOL

Gelieve te recyclen wanneer leeg.

Bestelcode: EUSTC100

StoCare is een handelsmerk van Rhodes Pharma Limited.

AR: بخاخ مزيل اللاصق الطبي
صيغة غير لاذعة، يمكن الرش في أي وضعية

التعليمات: قم برفع حافة الجهاز الطبي. رش البخاخ على الجلد المكشوف. ابدأ بإزالة الجهاز برفق. استخدم المزيد من البخاخ إذا لزم الأمر. اتركه يجف قبل وضع الجهاز التالي.

تحذير: استخدم فقط وفقًا للتعليمات. لا ترش على الجلد المتشقق أو المناطق الحساسة جدًا. لا ترش بالقرب من العينين أو داخلها. توقف عن الاستخدام إذا حدث تهيج. احفظ بعيدًا عن نظر ومتناول الأطفال.

المكونات: السيليوكسانا

خطر: لا ترش على لهب مكشوف أو أي مصدر إشعال آخر

حاوية مضغوطة. قد تنفجر عند التعرض للحرارة

احم من أشعة الشمس. لا تعرض لدرجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية

لا تثقب أو تحرق حتى بعد الاستخدام

ابتعد عن الحرارة، الأسطح الساخنة، الشرر، اللهب المكشوف ومصادر الإشعاع الأخرى

ممنوع التدخين

رداء شديد الاشتعال

يرجى إعادة التدوير عند التفريغ

بـل طـلـا زـمـر EUSTC100

StoCare هو علامة تجارية لـ Rhodes Health Limited.

ES: Spray Removedor de Adhesivo Médico

Fórmula no irritante, se puede pulverizar en cualquier posición

INSTRUCCIONES: Levante el borde del dispositivo médico. Pulverice sobre la piel expuesta. Comience a retirar el dispositivo suavemente. Use más spray si es necesario. Deje secar antes de aplicar el siguiente dispositivo.

PRECAUCIONES: Use solo según las instrucciones. No pulverice sobre piel lesionada o áreas muy sensibles.

No pulverice cerca de los ojos ni dentro de ellos. Suspenda su uso si ocurre irritación. Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.

INGREDIENTES: Siloxanos

PELIGRO: No pulverizar sobre llamas abiertas ni otras fuentes de ignición.

Envase a presión. Puede explotar si se calienta.

Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

No perforar ni quemar, ni siquiera después de su uso.

Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.

PROHIBIDO FUMAR.

AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

Por favor, recicle cuando esté vacío.

Código de pedido: EUSTC100

StoCare es una marca registrada de Rhodes Health Limited.

SE: Medicinsk Borttagningsspray för Häftämnen

Irriterar inte huden, kan sprayas i alla positioner

ANVISNINGAR: Lyft kanten på den medicinska apparaten. Spray på den blottade huden. Ta försiktigt bort apparaten. Använd mer spray vid behov. Låt torka innan nästa apparat appliceras.

FÖRSIKTIGHET: Använd endast enligt anvisningarna Spray inte på skadad hud eller mycket känsliga områden.

Spray inte nära eller i ögonen.

Avbryt användning om irritation uppstår. Förvara utom syn- och räckhåll för barn.

INGREDIENSER: Siloxaner

FARA: Spray inte på öppen låga eller andra antändningskällor.

Trycksatt behållare. Kan explodera vid uppvärmning.

Skydda från solljus. Utsätt inte för temperaturer över 50°C.

Får inte punkteras eller brännas, även inte efter användning.

Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.

RÖKNING FÖRBJUDEN.

EXTREMT BRANDFARLIG AEROSOL

Återvinn när tom.

Orderkod: EUSTC100

StoCare är ett varumärke som tillhör Rhodes Health Limited.