




Pure C&G T IX

Uživatelská příručka

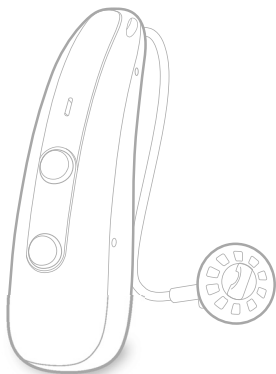

Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

Obsah

Vítejte	4
Vaše naslouchadla	5
Typ naslouchadla	5
Seznamte se se svými naslouchadly	6
Součásti a názvy	7
Ovládací prvky	9
Naslouchací programy	10
Vlastnosti	10
Každodenní použití	11
Vkládání a vyjímání naslouchadel	12
Zapínání a vypínání	17
Přepnutí do pohotovostního režimu	19
Nastavení hlasitosti	20
Změna naslouchacího programu	21
Další nastavení (volitelné)	21
Nabíjení	22
Speciální poslechové situace	25
Telefonování	25
Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu	26
Streaming audiosignálu pomocí telefonu se systémem Android	26
Bluetooth	26

Údržba a péče	28
Naslouchadla	28
Ušní koncovky	30
Profesionální údržba	32
Důležité bezpečnostní informace	33
Další informace	36
Příslušenství	36
Podmínky pro provoz, přepravu a skladování	36
Informace týkající se likvidace	38
Symboly použité v tomto dokumentu	38
Odstraňování poruch s naslouchadly	39
Specifické informace pro danou zemi	41
Servis a záruka	43

Vítejte

Děkujeme vám, že jste si vybrali naše naslouchadla, aby vás doprovázela vaším každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového vám bude chvíli trvat, než se s nimi seznámíte.

Tato příručka spolu s asistencí vašeho foniatra vám pomůže objasnit výhody a vyšší kvalitu života, kterou vám naslouchadla nabízejí.

Abyste vám naslouchadla poskytla maximální přínos, doporučujeme, abyste je používali každý den a od rána do večera. To vám pomůže si na ně zvyknout.



Zařízení nemusí vypadat přesně jako ilustrační nákresy v této příručce. Vyhrazuje si právo provádět jakékoli změny, které považujeme za nezbytné.



UPOZORNĚNÍ

Je důležité, abyste si pozorně prostudovali celou tuto uživatelskou příručku a příručku věnovanou bezpečnosti. Dodržujte bezpečnostní informace, abyste zabránili škodám nebo poškození zdraví.



Předtím, než svá naslouchadla poprvé použijete, zajistěte jejich plné nabití. Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce pro nabíječku.

Vaše naslouchadla



Tato uživatelská příručka popisuje volitelné funkce, jimiž mohou, ale nemusejí být vaše naslouchadla vybavena.

Obrátte se na svého foniatra, aby vám sdělil funkce, které platí pro vaše naslouchadla.

Typ naslouchadla

Vaše naslouchadla jsou typu RIC (Receiver-in-Canal). Přijímač je umístěn v ušním kanálu a připojen k naslouchadlu pomocí kabelu přijímače. Naslouchadla nejsou určena pro děti mladší než 3 roky nebo pro osoby, jejichž vývojový věk nedosahuje 3 let.

Napájecí článek (lithiová dobíjitelná baterie) je natrvalo zabudován do naslouchadla. Umožňuje snadné nabíjení pomocí Pure Charger nebo pomocí volitelné Pure Portable Charger nebo Pure Dry&Clean Charger.

Funkce bezdrátové komunikace umožňuje využívat pokročilé audiologické funkce a synchronizaci mezi vašimi naslouchadly.

Vaše naslouchadla jsou vybavena technologií Bluetooth® Low Energy* Technologie umožňující snadnou výměnu dat s vaším chytrým telefonem a bezproblémový streaming audiosignálu s vaším přístrojem iPhone** a některými smartphony se systémem Android, které podporují streamování audiosignálu do naslouchadel (ASHA).

Seznamte se se svými naslouchadly

Doporučujeme vám, abyste se se svými novými naslouchadly důkladně seznámili. Vezměte naslouchadla do rukou a zkuste si používání ovládacích prvků, abyste si zvykli, kde se na naslouchadlech nacházejí. Tímto způsobem si usnadníte obsluhu ovládacích prvků, až budete mít naslouchadla nasazena.


i

Jestliže máte problémy se stisknutím ovládacích prvků na naslouchadlech, když je máte nasazeny, můžete obrátit na svého foniatra, zda je pro ovládání vašich naslouchadel k dispozici dálkové ovládání nebo aplikace pro chytrý telefon.

* Vlastníkem slovní značky a loga Bluetooth je firma Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností WS Audiology Denmark A/S spadá pod licenční ujednání. Ostatní obchodní známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných společností.

** iPad, iPhone a iPod touch jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., které jsou registrovány v USA a v jiných zemích.

Součásti a názvy

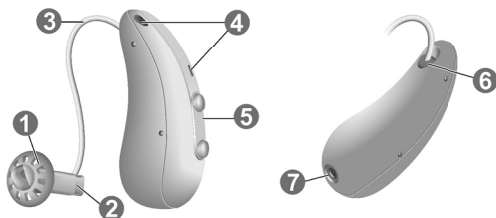

-
- | | |
|--------------------|--|
| ❶ Ušní koncovka | ❺ Kolébkový přepínač
(ovládání, vypínač) |
| ❷ Přijímač | |
| ❸ Kabel přijímače | ❻ Označení strany
(červená = pravé ucho,
modrá = levé ucho)
a připojení přijímače |
| ❹ Otvory mikrofonu | |
| | ❼ Nabíjecí kontakty |
-

Můžete používat následující standardní ušní koncovky:

Standardní ušní koncovky	Velikost
---------------------------------	-----------------

☐		Sleeve 3.0 Vented/Closed/ Power
-----------------------	---	------------------------------------

☐		Eartip 3.0 Open
-----------------------	---	-----------------

☐		Eartip 3.0 Tulip
-----------------------	---	------------------

Standardní ušní koncovky můžete snadno vyměnit. Další informace si přečtete v kapitole "Údržba a péče".

Ušní koncovky vyrobené na míru uživateli

☐		Earmold 3.0
-----------------------	---	-------------

Ovládací prvky

Pomocí kolébkového přepínače můžete například přepínat naslouchací programy. Požadované funkce pro kolébkový přepínač naprogramoval váš foniatr.

Funkce kolébkového přepínače	L	R
Krátké stisknutí:		
Následující/předcházející program	☐	☐
Zvýšení/snížení hlasitosti	☐	☐
Zvýšení/snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	☐	☐
Streaming TV zap./vyp.	☐	☐
Na asi 2 sekundy stiskněte:		
Následující/předcházející program	☐	☐
Zvýšení/snížení hlasitosti	☐	☐
Zvýšení/snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	☐	☐
Streaming TV zap./vyp.	☐	☐
Stiskněte a podržte déle než 3 sekundy:		
Zapnutí/vypnutí	☒	☒

L = levá strana, R = pravá strana



Jestliže si přejete přepnout naslouchací program a nastavovat hlasitost naslouchadel, můžete použít také dálkové ovládání. V aplikaci pro chytré telefony máte k dispozici ještě další možnosti nastavení parametrů.

Naslouchací programy

1

2

3

4

5

6

Další informace si přečtěte v kapitole „Změna naslouchacího programu“.

Vlastnosti

- ☐ **Zpoždění při zapínání** vám umožňuje si nasazovat naslouchadla, aniž by pískala.

Další informace si přečtěte v kapitole „Zapínání a vypínání“.

- ☐ **Terapeutická funkce Tinnitus** (potlačení hučení) generuje zvuk, abyste byli odvedeni od vašich hučivých zvuků.

Každodenní použití

Naslouchadla jsou vybavena integrovaným ovládacím prvkem, který umožňuje jejich pohodlné a snadné používání.

Navíc nabízíme aplikaci pro Android i iPhone, díky které bude manipulace se zařízením ještě snadnější. Ohledně stažení a instalace aplikace pro chytré telefony se obraťte na svého foniatra.

Vkládání a vyjímání naslouchadel

Vaše naslouchadla jsou precizně vyladěna pro vaše pravé a levé ucho. Strany se rozlišují barevnými značkami:

- červená značka = pravé ucho
- modrá značka = levé ucho




Vkládání naslouchadla:


- V případě zařízení Sleeves dávejte pozor, aby se ohyb jednotky Sleeve shodoval s ohybem kabelu přijímače.

Viz nákres na následující straně.

Správně:

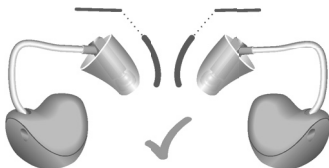


Nesprávně:

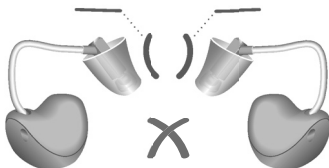

- Podržte kabel přijímače za jeho ohnutou část v blízkosti ušní koncovky.
- Opatrně zasuněte ušní koncovku do ušního kanálu ❶.
- Mírně je pootočte, aby bylo dobře usazeno.

Otevřete a zavřete ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu.

- Naslouchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ❷.

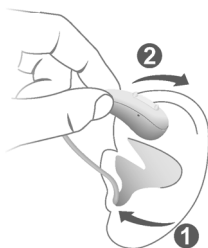

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!

- Vždy používejte kabel přijímače spolu s ušní koncovkou.
- Ujistěte se, že ušní koncovka je dokonale upevněna.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!

- Koncovku vkládejte do ucha opatrně a ne příliš hluboko.

i

- Může být pohodlné vkládat **pravé** naslouchadlo do ucha **pravou** rukou a **levé** naslouchadlo **levou** rukou.
- Pokud máte při zasouvání ušní koncovky problémy, pomocí druhé ruky jemně stáhněte ušní boltec směrem dolů. Tím se ušní kanál otevře a zasunutí ušní koncovky bude snazší.

Volitelná opěrná strunka pomáhá bezpečně udržet ušní koncovku v uchu. Připojení volitelného upevňovacího prvku:


Concha Lock Sleeve 3.0

- Nastavte polohu Concha Lock Sleeve 3.0 a přijímače způsobem uvedeným na obrázku. Následně nasuňte Concha Lock Sleeve 3.0 na přijímač, tak aby bezpečně sedělo.



Konchální příchytka Concha Lock 3.0

- Zarovnejte konec upevňovacího prvku s plochým koncem přijímače.

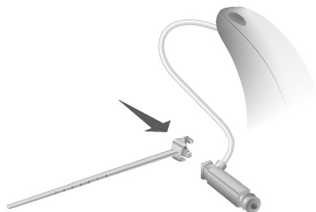

- Poté upevňovací prvek zatlačte do přijímače, dokud nezacvakne na místo.




Pokud chcete vložit opěrnou strunku na příslušné místo, postupujte následujícím způsobem:

- Ohněte opěrnou strunku a umístěte ji opatrně do spodní části svého ucha (viz obrázek).



Vyjímání naslouchadla:

- Naslouchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ①.
- Pokud je vaše naslouchadlo vybaveno uživatelskou tvarovkou nebo pouzdem, vyjměte je zatažením za malou vytahovací šňůrku směrem k zadní části hlavy.
- V případě jiných ušních koncovek: Dvěma prsty uchopte přijímač v ušním kanálu a opatrně jej vytáhněte ②.

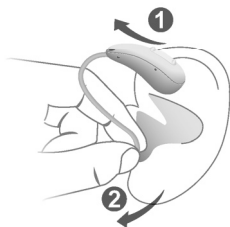

Netahejte za kabel přijímače.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!

- Ve velmi vzácných případech by Vám mohla při snímání naslouchadla koncovka zůstat v uchu. Jestliže se to stane, nechejte si koncovku vyjmout lékařem.

Po použití naslouchadla vyčistěte a vysušte. Další informace si přečtěte v kapitole „Údržba a péče“.

Zapínání a vypínání

Máte následující možnosti, jak můžete naslouchadla zapnout nebo vypnout.

Prostřednictvím nabíječky:

- Zapínání: Naslouchadla vyjměte z nabíječky.

V naslouchadlech se přehraje úvodní melodie. Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

- Vypínání: Umístěte naslouchadla do nabíječky.

Mějte na paměti, že nabíječka musí být připojena na napájení. Pokud budete potřebovat podrobné informace, nahlédněte do uživatelské příručky pro nabíječku.

Prostřednictvím kolébkového přepínače:

- Zapínání: Stiskněte a přidržte dolní část přepínače, dokud nezačne hrát uvítací melodie. Při přehrávání melodie uvolněte přepínač.

Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

- Vypínání: Stiskněte a několik sekund přidržte dolní část kolébkového přepínače. Přehraje se vypínací melodie.



Je-li aktivována funkce **zpoždění při zapínání**, naslouchadla se zapnou až poté, co uplyne prodleva v délce několika sekund. Během této doby si můžete naslouchadla vložit do uší, aniž byste slyšeli nepříjemné pískání způsobené zpětnou vazbou.

Funkci „zpoždění při zapínání“ vám může nakonfigurovat váš foniatr.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Pomocí dálkového ovládání můžete svá naslouchadla přepnout do pohotovostního režimu. Naslouchadla se tím ztlumí. Když pohotovostní režim opustíte, obnoví se **předtím** použité nastavení hlasitosti a naslouchacího programu.

Poznámka:

- V pohotovostním režimu **nejsou** naslouchadla vypnuta úplně. Spotřebovávají určitou energii.

Z tohoto důvodu doporučujeme používat pohotovostní režim jen po krátkou dobu.

- Pokud si přejete opustit pohotovostní režim, ale dálkové ovládání nemáte po ruce: Svá naslouchadla vypněte a znovu je zapněte (pomocí kolébkového přepínače nebo tím, že je na chvíli vložíte do nabíječky, dokud se nerozsvítí jedna nebo více LED kontrolky). V tomto případě se nastaví **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

Nastavení hlasitosti

Vaše naslouchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu.

- Dáváte-li přednost ručnímu nastavení hlasitosti, zvýšit hlasitost lze stisknutím horní části kolébkového přepínače a snížit hlasitost lze stisknutím dolní části.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete popis nastavení kolébkového přepínače.

Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni akustickým signálem (volitelné). Jakmile je dosaženo maximální nebo minimální hlasitosti, je možné, že uslyšíte tónový signál (volitelné).

Změna naslouchacího programu

V závislosti na akustické situaci naslouchadla automaticky nastavují svůj výstup.

Vaše naslouchadla mohou mít také několik naslouchacích programů, které vám umožňují podle potřeby změnit parametry zvuku. Na změnu programu můžete být upozorněni tónovým signálem (volitelné).

- Pokud si přejete změnit naslouchací program, krátce stiskněte kolébkový přepínač.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete popis nastavení kolébkového přepínače. Nahlédněte do kapitoly „Naslouchací programy“, kde naleznete seznam svých naslouchacích programů.

Je použito předdefinované nastavení hlasitosti.

Další nastavení (volitelné)

Prvky, kterými se ovládají naslouchadla, můžete použít rovněž pro změny nastavení jiných parametrů, například úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus).

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků.

Nabíjení

Můžete si vybrat z různých možností nabíječky:



❶ Pure Charger

❸ Pure Dry&Clean Charger

❷ Pure Portable
Charger

- Umístěte svá naslouchadla do nabíječky.
- Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce pro nabíječku. Užitečné rady týkající se nabíjení můžete najít také v uživatelské příručce pro nabíječku.

i

Než umístíte svá naslouchadla do nabíječky, vyčistěte jejich nabíjecí kontakty. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Údržba a péče“.

Signalizace slabého nabití

Pokud je napájecí článek téměř vybitý, uslyšíte výstražný signál. Tento signál se bude opakovat každých 15 až 30 minut podle nastavení. V závislosti na způsobu používání vašich naslouchadel máte přibližně ještě asi 1,5 hodiny, abyste svá naslouchadla nabili, než přestanou pracovat.

Mějte na vědomí, že životnost napájecího článku se sníží, pokud je současně používáno příliš mnoho funkcí.

Rady týkající se nabíjení

Může se stát, že budete mít nějaké otázky týkající se nejlepšího způsobu nabíjení vašich naslouchadel. Prostudujte si níže uvedené otázky a odpovědi. Jestliže máte nějaké další otázky, váš foniatr vám rád pomůže.

Jak často je nutné naslouchadla nabíjet?

Doporučujeme nabíjet naslouchadla každý den, i když napájecí článek není ještě vybitý. Nabíjejte je přes noc, abyste si mohli být jisti, že budete den začínat s plně nabitými naslouchadly.

Jak dlouho nabíjení trvá?

Nabíjecí cyklus pro plné nabití trvá přibližně 4 hodiny.

Po 30 minutách je možné naslouchadla používat po dobu až 6 hodin.

Doba nabíjení se může lišit v závislosti na používání naslouchadel a stáří napájecího článku.



Co se stane, když zapomenou naslouchadla nabít?

Když je napájecí článek vybitý, naslouchadla se automaticky vypnou. Naslouchadla co nejdříve nabijte.

Naslouchadla, která nebyla nabíjena po dobu delší než 6 měsíců, se mohou poškodit v důsledku nenávratného hlubokého vybití napájecího článku. Napájecí článek, u něhož došlo k hlubokému vybití, již není možné znovu nabít a musí být vyměněn.

Speciální poslechové situace

Telefonování

Pokud telefonujete, držte telefonní přijímač mírně nad svým uchem. Naslouchadlo a telefonní přijímač musí být proti sobě. Přijímač mírně pootočte, aby ucho nebylo zcela zakryto.



Program pro telefonování

Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování.

- Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování.

Pokud je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich naslouchadel, je to uvedeno v kapitole „Naslouchací programy“.

Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu

Vaše naslouchadla podporují technologii Made for iPhone. To znamená, že do svých naslouchadel můžete přímo z iPhoneu přenášet jak telefonní hovory, tak i třeba hudbu.

Kromě toho mohou vaše naslouchadla nabídnout funkci volání hands-free kompatibilní se zařízeními iPhone a iPad.

Pokud budete potřebovat další informace o kompatibilních zařízeních iOS a o ostatních užitečných funkcích, obraťte se na svého foniatra.

Streaming audiosignálu pomocí telefonu se systémem Android

Jestliže váš mobilní telefon podporuje Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA), můžete do svých naslouchadel přímo z telefonu přenášet telefonní hovory i hudbu.

Pokud budete potřebovat další informace o kompatibilních zařízeních se systémem Android, párování, streamování audiosignálu a o ostatních užitečných funkcích, obraťte se na svého foniatra.

Bluetooth

Vaše naslouchadla jsou vybavena bezdrátovou technologií Bluetooth, která umožňuje přenos zvukových dat z mobilních telefonů nebo jiných kompatibilních zařízení.

V letadle může být použití funkce Bluetooth omezeno, zejména při vzletu a přistání. V takovém případě můžete vypnout bezdrátovou technologii Bluetooth ve svých naslouchadlech pomocí aplikace v chytrém telefonu.

Indukční smyčky pro přenos audiosignálu

Některé telefony a veřejná místa, jako jsou divadla, nabízí možnost přenosu audiosignálu (hudba a mluvené slovo) pomocí indukční smyčky. Prostřednictvím tohoto systému mohou vaše naslouchadla přímo přijímat požadovaný signál – bez rušivého hluku v prostředí.

Systémy s indukční smyčkou pro přenos audiosignálu můžete obvykle poznat pomocí určitých značek.



Kdykoli se nacházíte na místě, kde je indukční smyčka pro audiosignál:

- Přepněte na program Telecoil.

Pokud je program Telecoil nastaven v konfiguraci vašich naslouchadel, je to uvedeno v kapitole „Naslouchací programy“.

Údržba a péče

Aby se zabránilo poškození, je důležité o naslouchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, která se brzy stanou běžnými činnostmi, které provádíte každý den.

Naslouchadla

Čištění

Vaše naslouchadla mají ochranný povlak. Pokud však nejsou naslouchadla pravidelně čištěna, mohou se poškodit nebo způsobit poškození zdraví uživatele.

- ▶ Každý den naslouchadla očistěte měkkým suchým hadříkem.
- ▶ Zařízení nikdy nemyjte pod tekoucí vodou a nikdy je neponořujte do vody.
- ▶ Při čištění zařízení nevystavujte tlaku.
- ▶ K čištění nabíjecích kontaktů nepoužívejte rozpouštědlo na bázi alkoholu.
- ▶ Abyste zabránili korozi, otřete z nabíjecích kontaktů nebo naslouchadel měkkým a suchým hadříkem pot nebo tekutinu, teprve poté je vložte do nabíječky.
- ▶ Požádejte svého foniatra o doporučené čisticí prostředky, speciální soupravu pro ošetřování nebo o další informace o tom, jak udržet svá naslouchadla v dobrém stavu.



Sušení

K vysoušení svých naslouchadel můžete použít běžné produkty. Informace o doporučovaných produktech k vysoušení a individuální pokyny, kdy máte svá naslouchadla sušit, získáte u svého foniatra.

Skladování

- Krátkodobé skladování (několik dnů): Pomocí kolébkového přepínače svá naslouchadla vypnete nebo je umístíte do nabíječky připojené na napájení.

Nabíječka musí být připojena k napájení. Pokud uložíte naslouchadla do nabíječky, která není připojena k elektrické síti, naslouchadla se **nevypnou**.

Pamatujte, že pokud naslouchadla vypnete prostřednictvím dálkového ovládání nebo aplikace pro chytrý telefon, naslouchadla **nejsou** vypnutá zcela. Přepnou se do pohotovostního režimu, ve kterém stále spotřebovávají energii.

- Dlouhodobé skladování (týdny, měsíce...): Napřed svá naslouchadla plně nabijte. Před uložením je vypnete pomocí přepínače. Při skladování naslouchadel doporučujeme používat vysoušecí prostředky.

Naslouchadla budete muset nabíjet v intervalech 6 měsíců, aby se zabránilo nenávratnému hlubokému vybití napájecích článků. Napájecí článek, u něhož došlo k hlubokému vybití, již není možné znovu nabít a musí být vyměněn. Opakované nabíjení doporučujeme častěji než jednou za 6 měsíců.

Dodržujte podmínky pro skladování uvedené v kapitole „Podmínky pro provoz, přepravu a skladování“.

Ušní koncovky


Čištění

Cerumen (ušní maz) se může akumulovat na ušních koncovkách. To může mít nepříznivý vliv na kvalitu zvuku. Každý den ušní koncovky vyčistěte.

Pro všechny typy ušních koncovek:

- Bezprostředně po vyjmutí očistěte ušní koncovku měkkou a suchou utěrkou.


Tím zabráníte zaschnutí a ztvrdnutí ušního mazu.

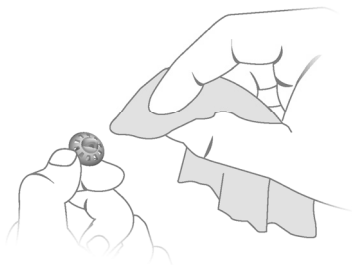


Výměna

Standardní ušní koncovky vyměňujte přibližně jednou za tři měsíce. Pokud zpozorujete praskliny nebo jiné změny, vyměňte je dříve. Postup při výměně standardní ušní koncovky závisí na jejím typu. V kapitole „Součásti a názvy“ váš foniatr typ ušní koncovky vyznačil.

- Chcete-li sundat starou ušní koncovku nebo Sleeve, postupujte podle níže uvedeného nákresu. Netahejte za kabel přijímače.

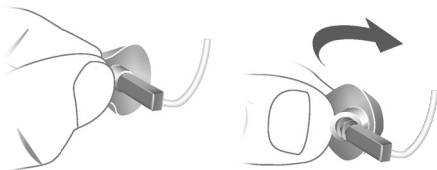

- Dbejte zvláště na to, aby nová ušní koncovka nebo Sleeve zcela překrývaly upevňovací kroužky na přijímači.
- Zkontrolujte, zda jsou nová ušní koncovka nebo Sleeve dobře upevněny.

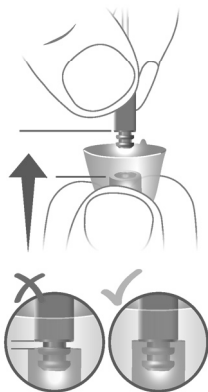

Profesionální údržba

Důkladné profesionální čištění a údržbu může uskutečnit váš foniatr.

Výměnu ušních koncovek vyrobených na míru uživateli a filtrů proti ušnímu mazu by měl podle potřeby provádět váš foniatr.

Požádejte svého foniatra, aby vám poskytl individuální doporučení týkající se intervalů údržby a podpory.

Důležité bezpečnostní informace



VÝSTRAHA

Lithiová dobíjitelná baterie je natrvalo zabudována do vašeho přístroje. Nesprávné použití přístroje může mít za následek, že lithiová dobíjitelná baterie vybuchne.

Nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu!

- Dodržujte bezpečnostní pokyny pro lithiovou dobíjitelnou baterii uvedené v této kapitole.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Nabíječku připojujte výhradně pomocí napájecího kabelu s USB, který vyhovuje požadavkům norem IEC 60950-1 a/nebo IEC 62368-1.



VÝSTRAHA

- ▶ Dodržujte provozní podmínky.
- ▶ Věnujte zvláštní pozornost ochraně svého zařízení před extrémním teplem (např. oheň, mikrovlnná trouba, indukční trouba nebo jiná indukční pole o vysoké intenzitě) a přímým slunečním zářením.
- ▶ Pro nabíjení naslouchadel používejte jediné schválenou nabíječku. Obrat'te se s prosbou o pomoc na svého foniatra.
- ▶ Zařízení nerozebírejte.
- ▶ Zařízení nepoužívejte v atmosférách, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- ▶ Pokud je zařízení zdeformované nebo zjevně poškozené, nepoužívejte je.
- ▶ Jestliže je výkon zařízení po nabití výrazně snížený, nepoužívejte jej. Vrat'te zařízení svému foniatrovi.
- ▶ Nelikvidujte zařízení v ohni nebo ve vodě.



VÝSTRAHA

Výměnu a opravy smí provádět jedině odborníci. Z tohoto důvodu:

- ▶ Neopravujte a ani nevyměňujte lithiovou dobíjitelnou baterii sami.
- ▶ Kvůli velmi nepravděpodobné možnosti prasknutí nebo výbuchu uchovávejte lithiové dobíjitelné baterie mimo jakékoli hořlavé materiály.

Nastane-li kterýkoli z výše uvedených případů, vraťte své zařízení foniatrovi.

Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace, nahlédněte do příručky věnované bezpečnosti, která je dodávána spolu s vašimi sluchadly.

Další informace

Příslušenství

K dálkovému ovládání naslouchadel můžete použít aplikaci chytrého telefonu (dostupnou v mnoha zemích). Tato aplikace umožňuje nastavovat naslouchadla z chytrého telefonu a dokonce si přizpůsobovat slyšení podle svých pocitů.

Potřebujete-li další informace, obraťte se na svého foniatra.

Podmínky pro provoz, přepravu a skladování

Naslouchadla fungují v rámci následujících podmínek v okolním prostředí (platí také v době mezi jednotlivými použitími):

Provozní podmínky	Vybíjení	Nabíjení
Teplota	0–50 °C (32–122 °F)	10–35 °C (50–95 °F)
Relativní vlhkost	5–93 %	5–93 %
Atmosférický tlak	700 až 1060 hPa	700 až 1060 hPa

V případě déletrvajících časových intervalů pro přepravu a skladování dodržujte prosím následující podmínky:

	Skladování	Přeprava
Teplota (doporučená)	10–25 °C (50–77 °F)	-20–60 °C (-4–140 °F)
Teplota (maximální rozsah)	10–40 °C (50–104 °F)	-20–60 °C (-4–140 °F)
Relativní vlhkost (doporučená)	20–80 %	5–90 %
Relativní vlhkost (maximální rozsah)	10–80 %	5–90 %
Atmosférický tlak	700 až 1060 hPa	700 až 1060 hPa

Pamatujte, že naslouchadla je třeba nabíjet alespoň každých 6 měsíců. Doporučujeme nabíjet naslouchadla každé 3 měsíce. Další podrobnosti najdete v oddílu „Údržba a péče“.

Na jiné součásti, jako je nabíječka, se mohou vztahovat jiné podmínky.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu během přepravy.

- Lithiové baterie a naslouchadla zasílejte v souladu s místními předpisy.

Informace týkající se likvidace

- ▶ Abyste zabránili znečištění životního prostředí, nevyhazujte napájecí články ani zařízení do komunálního odpadu.
- ▶ Obalové materiály, napájecí články a zařízení recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Symbole použité v tomto dokumentu

Symbole na zařízení nebo na obalu



Označuje situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká zranění.



Upozorňuje na hrozící hmotné škody.



Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe.



Štítek o shodě s CE potvrzuje shodu s určitými evropskými směrnici, viz kapitola „Informace o shodě“.



Označení výrobce přístroje z hlediska právních norem.

Označení

Made for

iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone“, „Made for iPad“ a „Made for iPod“ znamenají, že toto elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPhone, iPadu, nebo iPodu a že firma, která je vyvinula, prohlašuje, že splňuje výkonové normy firmy Apple. Firma Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení

a ani za to, že splňuje bezpečnostní normy a úřední nařízení. Mějte prosím na paměti, že použití tohoto příslušenství s jednotkami iPhone, iPad nebo iPod může mít nepříznivý vliv na výkon bezdrátové komunikace.

Odstraňování poruch s naslouchadly

Problém a možná řešení

Zvuk je slabý.

- Zvyšte hlasitost.
 - Nabijte naslouchadlo.
 - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

Naslouchadlo vydává pískavé zvuky.

- Znovu zasuněte ušní koncovku, aby bezpečně zapadla na své místo.
 - Snižte hlasitost.
 - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

Zvuk je zkreslený.

- Snižte hlasitost.
 - Nabijte naslouchadlo.
 - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

Naslouchadlo vydává tónové signály.

- Nabijte naslouchadlo.
-

Problém a možná řešení

Naslouchadlo nefunguje.

- Zapněte naslouchadlo.
 - Nabijte naslouchadlo. Věnujte rovněž pozornost stavovým LED kontrolkám na nabíječce.
-

Naslouchadlo se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda je napájení nabíječky správně připojeno.
 - Zkontrolujte, zda je naslouchadlo umístěno v nabíječce správně.
 - Vyčistěte nabíjecí kontakty naslouchadla.
 - Vyčistěte nabíjecí kontakty nabíječky.
-

Pokud se budete potýkat s jakýmikoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra.

Specifické informace pro danou zemi

USA a Kanada

Informace o certifikaci pro naslouchadla s funkcí pro bezdrátovou komunikaci:

Pure C&G T IX

- HVIN: RFM003
- Obsahuje FCC ID: 2AXDT-RFM003
- Obsahuje IC: 26428-RFM003

Servis a záruka

Výrobní čísla	Naslouchadlo	Jednotka přijímače
---------------	--------------	-----------------------

Vlevo:

Vpravo:

Data servisních úkonů

1:	4:
----	----

2:	5:
----	----

3:	6:
----	----

Záruka

Datum zakoupení:

Záruční doba v měsících:

Váš foniatr



Výrobce z hlediska právních norem

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lyngø

Dánsko

Distributor

Sivantos s.r.o.

Molákova 576/11

186 00 Praha 8 - Karlín

Tel.: +420 257 328 161

Email: sluchadla.cz@signia-pro.com

Dokument č. 05421-99T01-2D00 CS

Položka objednávky č. 210 291 70

Poslední revize 01.05.2023

www.wsaud.com

© 08.2023, WSAUD A/S.

Všechna práva vyhrazena.

www.signia.net

